



arco**Hoher Komfort, erstklassiges Design****Ergonomisch**

Kopfteil-, Rücken- und Sitzpolster sind besonders gewölbt und bieten zusammen mit dem individuell anpassbaren Kopfpolster mit Magnetbefestigung der Patientin ein angenehmes und komfortables Sitzgefühl. Mit einer Aufstiegshöhe von nur 550 mm können auch ältere oder körperlich eingeschränkte Patientinnen bequem Platz nehmen, die Sitzposition bleibt auch in tiefster Stellung waagrecht.

Stark

Ausgelegt auf eine Arbeitslast von 250 kg bietet der Stuhl viel Sicherheit auch für adipöse Patientinnen.

Zeitsparend

Eine optimierte Verstellgeschwindigkeit und bis zu vier frei wählbare Memorypositionen (modellabhängig) sorgen für eine rasche Einstellung in die gewünschte Position.

Funktionell

Der tiefe Gynausschnitt von 155 mm bietet verbesserten Zugang zum Untersuchungsfeld. Die Sekretschale bleibt auch bei Beckenhochlagerung in der Waage.





arco**Optimierte Nutzung, hoher Komfort,
erstklassiges Design****Hygiene**

Geschlossene Flächen und der Verzicht auf Ecken und Kanten gewährleisten optimierte hygienische Voraussetzungen und eine einfache Reinigung.

LED Beleuchtung

Abgestimmt auf Ihren Behandlungsraum, schafft die LED-Ambientebeleuchtung eine angenehme Atmosphäre.

Flexibel und zeitsparend arbeiten

mit bis zu vier frei wählbaren Memorypositionen.





arco **CE^{MD}****Modellübersicht**

Modell-Nr. Beschreibung



114.8500.0 arco 100 Untersuchungs- und Behandlungsstuhl
 Beckenhochlagerung elektromotorisch, Rückenteil im feststehenden Winkel (50°) mit dem Sitzteil verbunden, Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 mm bis 1.000 mm. Aktivierung der Verstellfunktionen über Fußbedienung.

114.8600.0 arco 100 M Untersuchungs- und Behandlungsstuhl
 Ausführung wie 114.8500.0, jedoch zusätzlich mit Memory-Funktion für 2 Positionen. Aktivierung der Verstellfunktionen sowie der Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung.




114.8700.0 arco 200 M Untersuchungs- und Behandlungsstuhl
 Ausführung wie 114.8500.0, jedoch zusätzlich mit Memory-Funktion für 4 Positionen, Beckenhochlagerung und Fußstützen (Zubehör) elektromotorisch verstellbar. Aktivierung der Verstellfunktionen sowie der Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung.

**Alle Grundtypen ohne Beinlagerungssystem.
 Wählen Sie aus 4 Möglichkeiten: Seite 106 - 109.**

Entdecken Sie unseren
 neuen Produkt- und
 Farbkonfigurator!



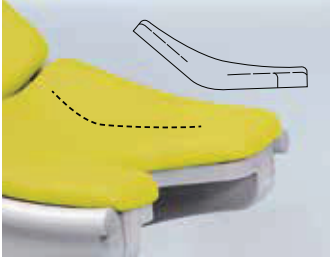

Gerade geformtes Sitzprofil für eine entspannte und fachgerechte Untersuchungsposition.



Sekretschale aus Edelstahl im Kunststoffrahmen, in fester Positionierung pendelnd gelagert.



Hand- und Fußbedienung

- flexible Positionierung der herausnehmbaren Fußbedienung für entspanntes und bequemes Arbeiten
- Speicherung und Abrufen von bis zu 4 Memory-Positionen
- Sanfter Anlauf der Stuhlbewegungen
- Steuerung aller Bewegungsabläufe über Fuß- oder Handbedienung



arco**Serienmäßige Ausstattung**

Sitz-, Rücken- und Kopfteilpolster ergonomisch gepolstert, Sekretschale aus Chromnickelstahl, im Kunststoffrahmen, in fester Positionierung pendelnd gelagert, herausnehmbar, 325 × 175 × 65 mm (B x L x H), 2,5 Liter Volumen. Magazin zur Aufnahme von 400 oder 500 mm breiten Papierrollen, max. Durchmesser 140 mm, Papier abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur über das Sitzpolster. Mit Fußbedienung, Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben, Kunststoffverkleidung silbergrau, Rahmen pulverbeschichtet nach Farbkarte, Polsterbezug nach Farbkarte.

Mit Beinlagerungsaufnahmen, hiermit können Fußstützen oder Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff schnell entnommen oder einzeln waagrecht geschwenkt werden (entfällt bei Ausstattung mit Seitenschiene 101.0461.0).

Anschluss:

Anschlusskabel 3 m mit Netzstecker, Anschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz, max. 0,94 kW. Länderspezifische Ausführungen auf Anfrage.

Gewicht:

Nettogewicht: ca. 96 kg (114.8500.0 und 114.8600.0)
 Nettogewicht: ca. 100 kg (114.8700.0)
 Sichere Arbeitslast: 250 kg

Lackierung:

Hochwertige Pulverbeschichtung. Hochglänzende Oberfläche mit extremer Stoß- und Kratzfestigkeit. Leicht zu reinigen, desinfektionsfest und klimabeständig. Lieferbare Farben ohne Mehrpreis nach SCHMITZ-Farbkarte.

Polsterung:

Schaumstoff auf Trägerplatte, mit erstklassigem, strapazierfähigem Kunstlederbezug. Lieferbare Farben ohne Mehrpreis nach SCHMITZ-Farbkarte (classic und comfort).




Bestellhinweis:

Bitte bei der Bestellung angeben:

Beinlagerungssystem: siehe Seite 106 - 109
 Polsterfarbe: siehe Farbpalette, Seite 152
 Pulverbeschichtung: siehe Farbpalette, Seite 152

Artikel-Nr.	Beschreibung
-------------	--------------

100.0510.0	Weitere Farbtöne nach RAL-Karte (o. Abb.)
-------------------	-----------------------------------------------------

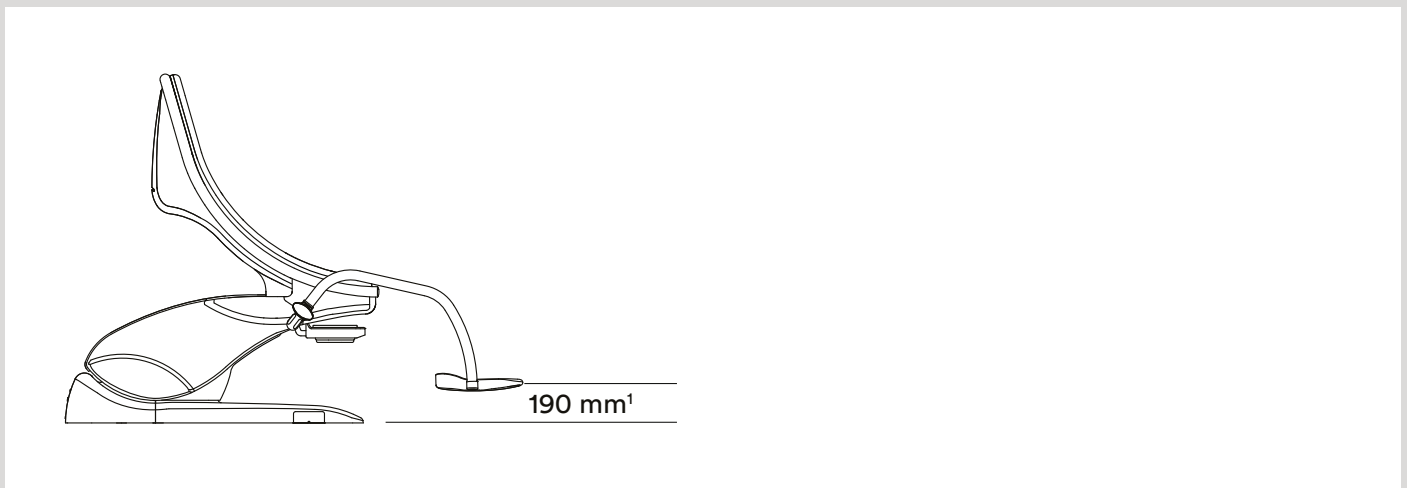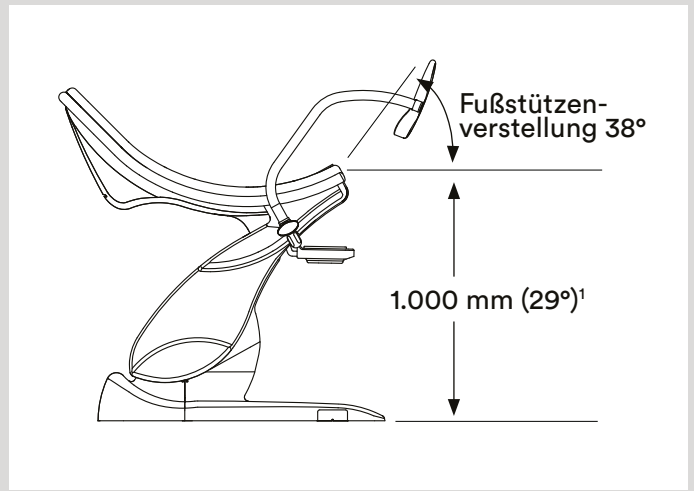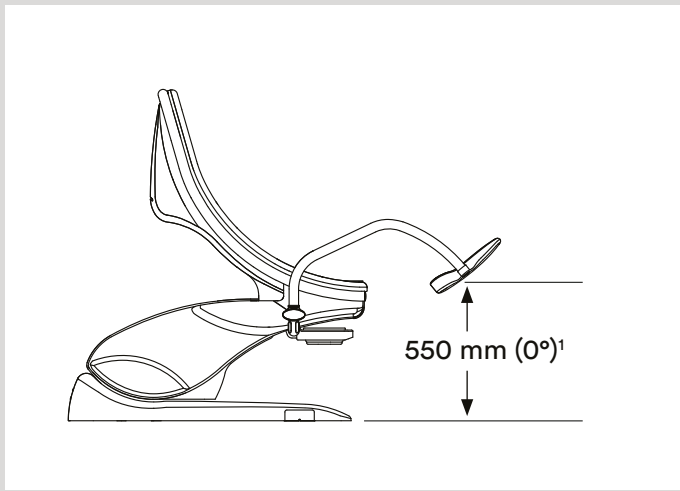

arco

Verstellfunktionen und Maße

Maße

Bodenplatte	1.135 × 605 mm
Polsterbreite	595 mm (Sitzbereich) bis 650 mm (Rückenbereich)
Polsterstärke	50 mm
Sichere Arbeitslast	250 kg



reddot award 2017
winner

Hinweis!

Wir empfehlen eine jährliche Wartung des arco Untersuchungsstuhls.

SCHMITZ unterstützt Sie hierbei durch einen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Servicevertrag.

Sprechen Sie uns gerne an!



Beckenhochlagerung
114.8500.0 bis 114.8700.0

elektrische Fußstützenverstellung
114.8700.0



arco **Beinlagerungssysteme**

Modell-Nr. Beschreibung



101.0456.0 Fußstützen (Paar)
mit integriertem Handgriffbügel, pulverbeschichtet nach Farbkarte, schwenk- und feststellbar. Schutzüberzüge aus durchsichtigem Kunststoff für Fußplatten.



101.0457.0 Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff (Paar)
mit integriertem Handgriffbügel, pulverbeschichtet nach Farbkarte, Integralschaumpolster silbergrau, mit Festschnallgurten, Stange aus Chromnickelstahl 18/10.



101.0459.0 Beinhalter nach Göpel (Stück)
Integralschaumpolster in silbergrau, mit Festschnallgurt, Stange aus Chromnickelstahl 18/10, ohne Spannkloben. Bitte Seitenschiene 101.0461.0 oder 101.0462.0 und Spannkloben 101.1670.0 berücksichtigen.



101.1670.0 Spannkloben (Stück)
drehbar, aus Chromnickelstahl 18/10, zur Montage auf Seitenschiene.

101.0461.0 Seitenschiene (Paar)
für das Sitzteil, aus Chromnickelstahl 25 x 10 mm, 290 mm lang.



Lagerung mit UniLeg Beinhaltern
(Abb. mit Untersuchungsstuhl arco-matic®)



Lagerung mit UniLeg Beinhaltern
(Abb. mit Untersuchungsstuhl arco-matic®)

arco 

Beinlagerungssysteme

Modell-Nr. Beschreibung



101.0369.0 Beinhalter UniLeg (Paar) mit Peroneusschutz
höhenverstellbar und spreizbar vom Fußende,
mit Gasfederunterstützung, Kunststoffschale
mit Polster für Fuß und Unterschenkel,
in alle Positionen einstellbar, mit integrierter
Seitenschienenaufnahme.



101.0678.0 Beinhalter UniLeg (Paar)
Ausführung wie 101.0369.0 UniLeg,
jedoch **ohne** Peroneusschutz

Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass für die beiden UniLeg Varianten die abweichende "Preisgruppe E" für OP-Zubehör gilt. Der Wiederverkäuferrabatt kann daher abweichend sein!

arco C^{MD} Zubehör

Modell-Nr. Beschreibung



101.0473.0 Kunstlederbezug (Paar)
für Handgriffbügel der Fußstützen,
mit Reißverschluss, nach Farbkarte.



101.0474.0 Kunstlederbezug (Paar)
für Handgriffbügel der Beinhalter nach Göpel,
mit Reißverschluss, nach Farbkarte.



101.0472.2 Kopfpolster
mit Magnetbefestigung,
Kunstlederbezug nach Farbkarte.



101.0475.0 Schutzüberzüge (Paar)
aus durchsichtigem Kunststoff, für Fußstützplatten.



101.0476.0 Schutzbezug
für das Sitzpolster.

Modell-Nr. Beschreibung



101.0489.0 Papierrolle
500 mm breit, für integriertes Magazin.



101.0495.0 Sekretschale mit Komforthalterung
aus Edelstahl, im Kunststoffrahmen, immer in waagrechtlicher Position, ausziehbar und herausnehmbar,
325 x 175 x 65 mm (B x L x H), 2,5 Liter Volumen.

arco **CE^{MD}**

Zubehör

Modell-Nr. Beschreibung



101.0462.0 Seitenschiene (Stück)
für das Sitzteil, aus Chromnickelstahl 25 × 10 mm,
150 mm lang.



101.0482.0 2 Steckdosen
gemäß EN 60601-1.
(Nachrüstung nicht möglich)



101.0483.0 2 Steckdosen
(o. Abb.) wie Steckdosen 101.0482.0,
jedoch Schweizer Ausführung.
(Nachrüstung nicht möglich)

101.0481.0 Potentialausgleichsbuchse



101.0467.0 Kolposkophalterung
für Systeme Leisegang, Leica, Kaps und Zeiss,
rechts oder links montierbar. Für Systeme Kaps
und Zeiss, bitte Anschlussrohr mit Klemmhalter
beim Kolposkophersteller mitbestellen!
(ohne Kolposkop)

Modell-Nr. Beschreibung



101.0487.0 LED Ambientebeleuchtung

beidseitige LED-Beleuchtung oberhalb der Farbblende, Farbauswahl mit 13 verschiedenen Farben, wechselbar über Schalter unter der Farbblende, abgestimmter Farbton voreingestellt auf die gewählte Polsterfarbe (weißes LED Licht bei braunem, schwarzem und grauem Polsterfarbton).



101.0488.0 Farbblende

farbige Blende, optisch passend zur Polsterfarbe.



101.0469.0 Fußbügel für den Arzt

aus Patientensicht links montiert.

101.0468.0 Fußbügel für den Arzt

(o. Abb.) aus Patientensicht rechts montiert.



101.0466.0 Fahrbarkeit

2 Doppelrollen Ø 75 mm, 4 Bockrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, mit Zentralfeststellung. (nachrüstbar)

Hinweis:

Nicht zulässig für den Patiententransport!



Zentralfeststellung